


Software für Ihr papierloses Labor



AP Connect

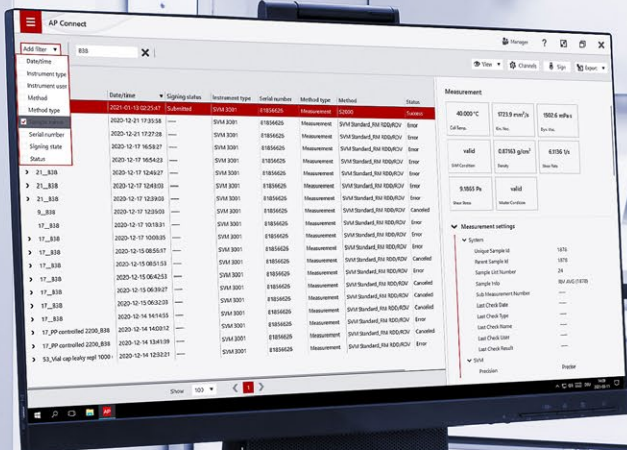

AP Connect

Für einen optimalen Datenfluss.

IHRE DATEN SIND KOMPLEX, ABER UNSERE SOFTWARE IST EINFACH.

Einfach anschließen und loslegen. Alle Ihre Labordaten sind nur einen Klick entfernt: AP Connect ist eine Laborsoftware, die Ihre Geräte verbindet, Messinformationen weitergibt und die Einhaltung von Regularien sicherstellt. Ihre Datendrehscheibe im Labor – zum Greifen nah.



FUNKTIONIEREN MEINE GERÄTE MIT AP CONNECT?
HIER FINDEN SIE MEHR ALS 50 ANTON PAAR-GERÄTE,
DIE SICH VERBINDEN LASSEN.

Paperless.
Data at your fingertips.

WARUM IST AP CONNECT ANDERS ALS ANDERE SOFTWARE?

Die einzigartige Systemarchitektur ermöglicht eine Integration innerhalb weniger Minuten. Danach einfach anschließen und loslegen! Keine komplexe und zeitaufwendige Implementierung. Kein Schnickschnack. Zeitsparende Funktionalität und erhöhte Produktivität.

ZEHNTAUSENDE MESSUNGEN IN EINEM DIGITALEN RAUM. 100 % EFFIZIENZ. ES MACHT SOGAR SPASS! BESCHLEUNIGEN SIE IHRE LABORARBEIT.


INTEGRIEREN SIE IHRE DATEN – IN 3 EINFACHEN SCHRITTEN

- 1. Installieren Sie AP Connect in nur 4 Minuten.**
- 2. Melden Sie sich in Sekundenschnelle mit Ihren Windows-Zugangsdaten (Active Directory) bei AP Connect an.**
- 3. Registrieren Sie Ihre Geräte in weniger als 1 Minute.**

* verbunden mit Ihrem Firmennetzwerk



www.anton-paar.com/apc

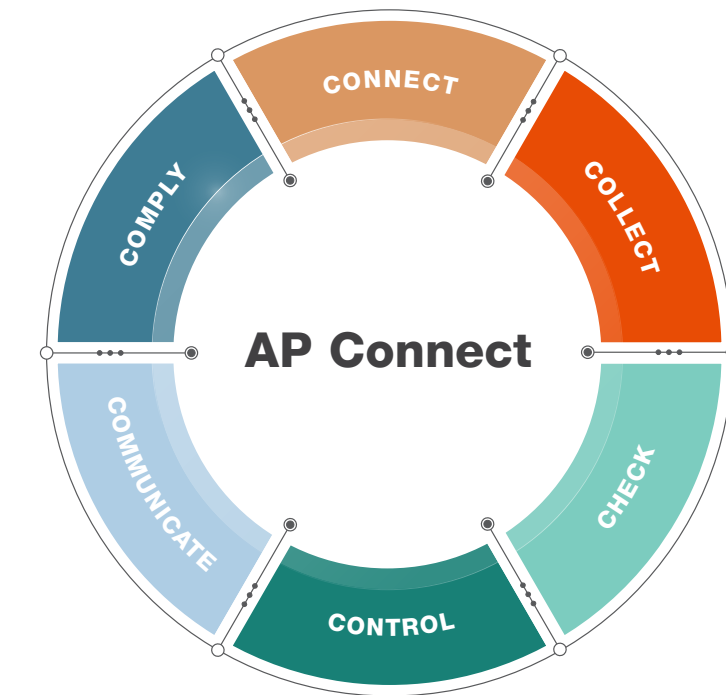

<p>CONNECT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plug & Play - Verbinden Sie bis zu 30 von mehr als 50 Geräten mit 1 Lizenzschlüssel - Auch für Geräte von anderen Herstellern anwendbar 	<p>COLLECT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eine zentrale Datenbank für alle Ihre Messdaten - Zugriff aus dem gesamten Firmennetzwerk - Mit Informationen arbeiten statt sie zu suchen 	<p>CHECK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rufen Sie Ihre Daten jederzeit ab, um schneller Entscheidungen zu treffen. - Audit-Trail für lückenlose Rückverfolgbarkeit bei Ihrer Laborarbeit. - Konfigurierbarer Freigabeprozess mit elektronischer Signatur für alle Ihre Daten
<p>Eliminieren von Übertragungsfehlern garantiert Datenqualität.</p>	<p>Papierloses Arbeiten spart Zeit und setzt Ressourcen frei.</p>	<p>Alle Daten an einem Ort für schnelle und sichere Entscheidungen.</p>
<p>CONTROL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Benutzerverwaltung mittels Active Directory - Eindeutige Zuweisung von Rollen & Rechten - Starten von Messungen (mit mehr als 10 Parametern) direkt von Ihrem PC aus 	<p>COMMUNICATE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Automatischer Export nach Ihren konfigurierten Regeln: <ul style="list-style-type: none"> - Zur Dokumentation Ihrer Laborarbeit - Für den Datenfluss zu Ihrem externen Datenmanagementsystem (z. B. LIMS) - Manueller Export: Selektive Datenauswahl zur vollständigen Kontrolle des Datenflusses 	<p>COMPLY</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Kombination aller AP Connect Funktionen gewährleistet volle Einhaltung der Vorschriften in regulierten Umgebungen (z. B. FDA 21 CFR Part 11).
<p>Erhöhter Probendurchsatz dank Batch-Messung</p>	<p>Kommunikationswege nur 1 Mal konfigurieren, und schon fließen die Daten ungehindert.</p>	<p>System-Audit-Trail und Rechteverwaltung garantieren volle Rückverfolgbarkeit.</p>


Lernen Sie alle AP Connect-Funktionen in unseren Videos (1 Min.) kennen

www.anton-paar.com/apc-videos

AP Connect

Editionen: Start,
Standard und Pharma

**LADEN SIE DIE
VOLLSTÄNDIGE
60-TAGE-DEMOVERSION
HERUNTER**

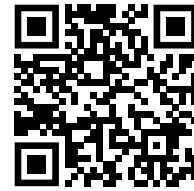

www.anton-paar.com/apc-demo

	FREE	START	STANDARD	PHARMA
		Für alle Kundinnen und Kunden, die sich mit AP Connect vertraut machen wollen und ein einzelnes Gerät anschließen möchten.	Für Labore in vielfältigen Industrien und Applikationen, insbesondere:	Fokussiert auf Labore in stark regulierten Umgebungen und für Betriebe mit spezifischen, strengen Prüfanforderungen, insbesondere:
Branchen		<ul style="list-style-type: none"> - Lebensmittel- und Getränkeindustrie - Erdölindustrie - Chemische Industrie - Aroma- und Duftstoffindustrie 	<ul style="list-style-type: none"> - Lebensmittel- und Getränkeindustrie - Erdölindustrie - Chemische Industrie - Aroma- und Duftstoffindustrie 	<ul style="list-style-type: none"> - Pharmazeutische Industrie - Kosmetik- und Körperpflege-Industrie - Gesundheitswesen - Nahrungsergänzungsmittel-Industrie - behördliche Konformität
Lizenz		Kostenlos	Unbefristet oder Abonnement	Unbefristet oder Abonnement
Geräteanbindung		1 Gerät	bis zu 30 Geräte	bis zu 30 Geräte
Datenerfassung		✓	✓	✓
Desktop-Installation		✓	✓	✓
Datenauswertung		✓	✓	✓
Datenexport		✓	✓	✓
Konfigurierbare automatische Exporte		1 Regel	bis zu 100 Regeln	bis zu 100 Regeln
Unterstützte Dateiformate		PDF, CSV	PDF, XLS, CSV	PDF, XLS, CSV
Server-Installation		✓	✓	✓
Client-Installation (Mehrbenutzerzugriff)		1 Benutzerin / 1 Benutzer	✓	✓
Benutzerverwaltung mit Active Directory		✓	✓	✓
Verbindung mit Geräten von Drittanbietern			✓	✓
Automatische Messungen			✓	✓
Rollen und Berechtigungen				✓
Audit-Trail				✓
Freigabeprozess				✓
Elektronische Signatur				✓
Übereinstimmung mit Titel 21 CFR Part 11				✓

Gemäß den in der Tabelle dargestellten Merkmalen ist die Einhaltung des ALCOA++ Datenintegritätsprinzips gewährleistet.

