


Logiciel pour votre laboratoire sans papier



AP Connect

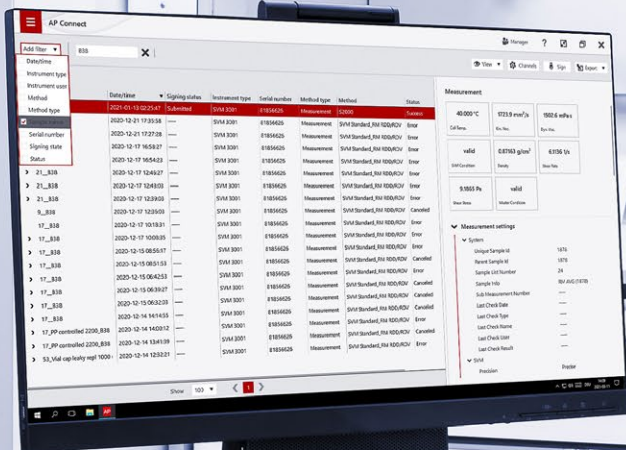

AP Connect

Let the data flow

LES DONNÉES PEUVENT ÊTRE COMPLEXES, MAIS CECI EST FACILE.

Connectez et collectez, branchez et utilisez.
Toutes vos données de laboratoire à portée d'un clic AP Connect est un logiciel de laboratoire qui connecte vos instruments, communique les informations de mesure et garantit la conformité. C'est votre hub de données dans le laboratoire - au bout de vos doigts instead of au bout devosdoigts.



MES INSTRUMENTS FONCTIONNENT-ILS AVEC AP CONNECT ?
VOIR L'ENSEMBLE DES 50+ INSTRUMENTS ANTON PAAR
QUI SE CONNECTENT

Paperless.

Data at your fingertips.

POURQUOI AP CONNECT EST-IL DIFFÉRENT DES AUTRES ?

L'architecture unique du système permet une intégration plug and play en quelques minutes. Aucune mise en œuvre complexe et fastidieuse. Aucune clochette ni de sifflets. Une fonctionnalité qui permet de gagner du temps et d'accroître la productivité.

DES DIZAINES DE MILLIERS DE MESURES, DANS UN SEUL ESPACE NUMÉRIQUE. 100 % D'EFFICACITÉ. VOIRE MÊME AMUSANT. CATALYSEZ VOTRE TRAVAIL DE LABORATOIRE.


RÉCOMPENSEZ VOS DONNÉES - EN 3 ÉTAPES SIMPLES

1. Installer AP Connect - un seul installateur en 4 min
2. Connectez-vous à AP Connect en quelques secondes avec vos informations d'accès Windows (Active Directory)
3. Enregistrez vos instruments en moins d'une minute.

* connecté au réseau de votre entreprise



www.anton-paar.com/apc

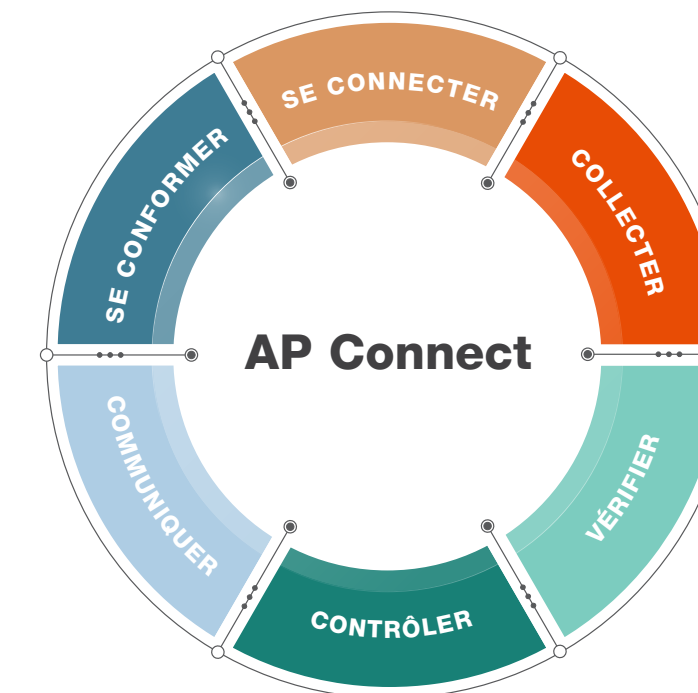

CONNECTER

- Plug & play
- Connectez jusqu'à 30 instruments parmi plus de 50 avec une seule clé de licence
- Ouvert aux instruments d'autres fabricants

COLLECTER

- Une base de données centrale pour toutes vos données de mesure
- Accédez depuis n'importe où du réseau de l'entreprise
- Ouvert aux instruments d'autres fabricants

CONTRÔLER

- Consultez vos données à tout moment pour prendre une décision plus rapidement
- Fonction d'audit trail pour une traçabilité complète
- Processus d'approbation configurable de toutes vos données avec signature électronique

L'absence d'erreur de transcription garantit la qualité des données.

L'absence de documentation permet de gagner du temps et de libérer des ressources pour l'analyse des données.

Toutes les données à analyser en un seul endroit permettent de prendre des décisions rapides et sûres.

COMMANDER

- Gestion des utilisateurs avec Active Directory
- Attribution sécurisée des rôles et des autorisations
- Déclenchez des mesures avec plus de 10 paramètres directement depuis votre PC

COMMUNIQUER

- Exportation automatique déclenchée par vos règles personnalisées :
 - Pour la documentation de vos travaux de laboratoire
 - Pour le flux de données vers votre système externe de gestion des données (par exemple, LIMS)
- Exportation manuelle : sélectionnez activement les données pour contrôler entièrement votre flux de données

SE CONFORMER

- La combinaison de toutes les fonctionnalités d'AP Connect garantit une conformité totale dans les environnements réglementés (par exemple, FDA 21 CFR Part 11).

Des mesures en série augmentent le débit d'échantillons

Configurez une fois vos chemins de communication et vos données vont circuler librement.

L'audit trail du système et la gestion des autorisations garantissent une traçabilité totale.


Trouvez des vidéos d'une minute pour toutes les fonctions d'AP Connect

www.anton-paar.com/apc-videos

AP Connect

Éditions : Start,
Standard, Pharma

TÉLÉCHARGER LA
DÉMO COMPLÈTE DE
60 JOURS

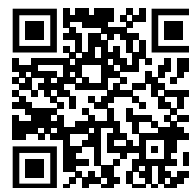

www.anton-paar.com/apc-demo

GRATUIT

	START	STANDARD	PHARMA
	<p>Pour tous les clients qui souhaitent se familiariser et évoluer avec AP Connect et qui souhaitent connecter un seul instrument.</p>	<p>Large base. Pour les laboratoires, et les applications, à travers les industries, en particulier :</p>	<p>Axé sur les laboratoires dans des environnements intensément réglementés. Pour les opérateurs ayant des exigences spécifiques strictes en matière de tests, notamment :</p>
Secteurs d'application instead of secteurs d'application	<ul style="list-style-type: none"> - Industrie alimentaire et de la boisson - Industrie pétrolière - Industrie chimique - Secteur des arômes et des parfums 	<ul style="list-style-type: none"> - Industrie alimentaire et de la boisson - Industrie pétrolière - Industrie chimique - Secteur des arômes et des parfums 	<ul style="list-style-type: none"> - Industrie pharmaceutique - Industrie des soins personnels - Industrie des soins de santé - Industrie nutraceutique - Conformité réglementaire
Licence	Gratuite	Perpétuel ou abonnement	Perpétuel ou abonnement
Connectivité des instruments	1 instrument	jusqu'à 30 instruments	jusqu'à 30 instruments
Collecte des données	✓	✓	✓
Installation sur le poste de travail	✓	✓	✓
Analyse de données	✓	✓	✓
Export de données	✓	✓	✓
Exportations automatiques configurables	1 règle	jusqu'à 100 règles	jusqu'à 100 règles
Formats de fichier pris en charge	PDF, CSV	PDF, XLS, CSV	PDF, XLS, CSV
Installation sur serveur	✓	✓	✓
Installation du client (accès multi-utilisateurs)	1 client	✓	✓
Gestion des utilisateurs avec Active Directory	✓	✓	✓
Connectez aux instruments de tiers		✓	✓
Déclenchement des mesures (mesure automatisée)		✓	✓
Rôles et autorisations			✓
Audit Trail			✓
Processus d'approbation			✓
Signature électronique			✓
Conforme 21 CFR partie 11			✓

Selon les caractéristiques présentées dans le tableau, le respect du principe d'intégrité des données ALCOA++ est assuré.

© 2021 Anton Paar GmbH | Tous droits réservés.
Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable.
D96IP008FR-B

www.anton-paar.com