




Callisto 100

全自动冷滤点测定仪

Callisto 100 全自动冷滤点测定仪

全自动紧凑型CFPP测定仪Callisto 100，用于测定诸如柴油，生物柴油，混合柴油和瓦斯油的低温性能。

Callisto 100内置了全新开发的最先进的帕尔贴元件，连接无甲醇冷却系统就可满足测试要求，同时保证了冷却套管内出色的温度均匀性。温度均匀性是保证冷滤点测试结果准确性的最关键和最具决定性的因素。

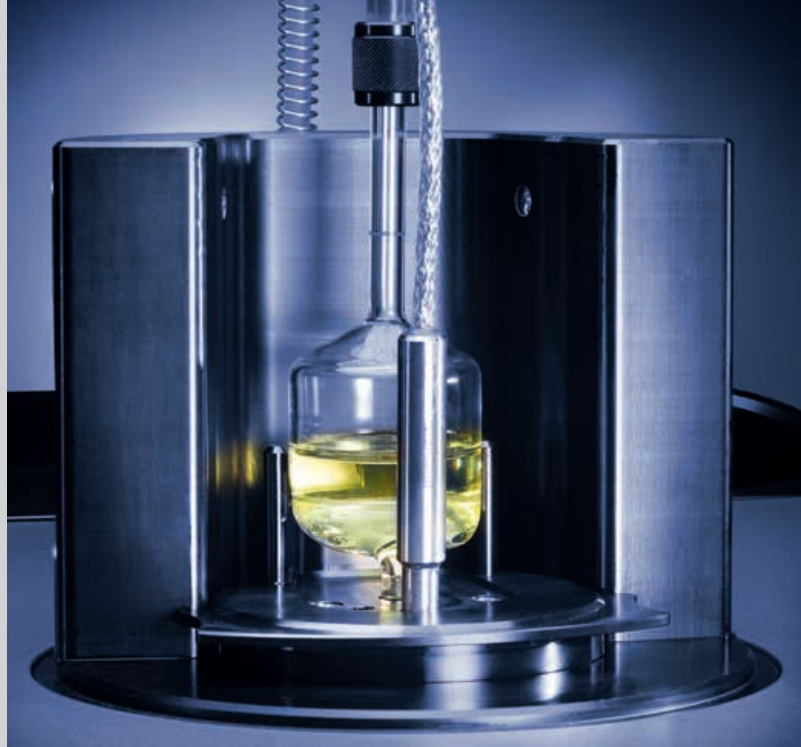

优势一览

- ▶ 无误检测
- ▶ 简易直观的操作界面
- ▶ 高样品通量
- ▶ 便捷的清洗流程

操作便捷

- ▶ 得益于无接触检测技术，整个过滤装置安装简便
- ▶ 出色的检测系统，即便在吸量管出现结霜的情况下
- ▶ 内置标准程序方法，一键启动测试
- ▶ 多彩大屏幕，显示测试过程中样品和套管的实时温度
- ▶ 图形信息显示出抽吸样品和样品回流时间，以便观察样品在不同温度下的性能
- ▶ 依据标准方法，统计评价测试结果
- ▶ 易于使用的温度和真空度校准程序
- ▶ 全自动清洗过程

灵活的用户自定义测试

- ▶ 提供手动浊点和倾点测试（测试组件可选配）

标准方法

ASTM D6371, SH/T 0248, EN 116, EN 16329, JIS K 2288, IP 309

使用选配组件用于浊点和倾点测试

ASTM D2500, ISO 3015, EN 23015, JIS K 2601, IP 219 (cloud point)

ASTM D97, ASTM D5853, ISO 3016, JIS K 2269, IP 15, IP 441 (pour point)

技术规格

测量范围	-60 °C – 45 °C
温控模式	可编程的梯度或者线性模式 (6°C/h到100°C/h)
校准	▶ 样品和套管温度，真空度的全自动校准程序 ▶ 温度探头校正表
外置冷浴装置	▶ 用户自购或者选配安东帕原厂附件 ▶ 冷却功率：-20°C时280W
数据存储	▶ 1000个测试结果 ▶ 90个用户自定义程序方法
数据输出	▶ 通过USB和LAN连接传输数据，输出格式是XLS或者PDF
串口	4x USB, 1x RS232, 1x LAN, 1x VGA
电源	AC 100 V to 240 V, 50 Hz/60 Hz, 290 VA
尺寸	340 mm x 580 mm x 310 mm (宽 x 深 x 高)
重量	14 kg

您的经销商：