


Alcoomètre portable

Snap 41 | Snap 51



EN SAVOIR PLUS

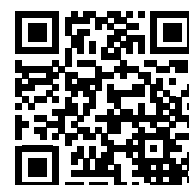

[www.anton-paar.com/
BuySnap](http://www.anton-paar.com/BuySnap)

 Acheter en ligne
shop.anton-paar.com

Les Snap 41 et Snap 51 sont les alcoomètres numériques les plus précis du marché. Ils permettent de mesurer les spiritueux sur site en moins de 30 secondes. Ils mesurent la teneur en alcool de tous vos distillats sans sucre, qu'ils soient légers ou forts, tout au long du processus de production.



Obtenez le résultat final : aucune correction manuelle



Des routines de travail clairement définies : aucun risque d'erreur



Ajustez le degré d'alcool de vos spiritueux avec une précision allant jusqu'à 0,1 % v/v



Un appareil remplace tous les aéromètres en verre sur le lieu de travail



Une conception robuste avec boîtier résistant aux éclaboussures (IP 54)



Les alcoomètres d'Anton Paar sont des standards industriels utilisés dans les distilleries et les organisations gouvernementales

**Notre garantie de 3 ans est disponible pour tous les clients.
Tous les nouveaux instruments incluront la réparation pendant 3 ans.**

	Snap 41	Snap 51
Brevets délivrés	Brevet AT516421 (B1), EP3015847 (B1)	–
Plage de mesure	Alcool : 0 % v/v à 100 % v/v Température : 5 °C à 30 °C (41 °F à 86 °F) (correction automatique de la température)	Alcool : 0 % v/v à 100 % v/v Température : 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F) (correction automatique de la température)
Précision	Alcool : 0,2 % v/v Température : 0,2 °C (0,4 °F)	Alcool : 0,1 % v/v Température : 0,1 °C (0,2 °F)
Écart-type de répétabilité*	Alcool : 0,1 % v/v Température : 0,1 °C (0,2 °F)	Alcool : 0,05 % v/v Température : 0,05 °C (0,1 °F)
Écart-type de reproductibilité*	Alcool : 0,15 % v/v	Alcool : 0,07 % v/v
Résolution	Alcool : 0,01 % v/v Température : 0,1 °C (0,1 °F)	Alcool : 0,01 % v/v Température : 0,01 °C (0,01 °F)
Température ambiante	0 °C à 35 °C (32 °F à 95 °F)	-10 °C à +50 °C (14 °F à 122 °F)
Principe de mesure	Technologie du tube en U oscillant	Technologie du tube en U oscillant
Unités de mesure intégrées	Concentration en alcool en %v/v à 20 °C ou à 15 °C, °Proof	Concentration en alcool en %v/v (à 20 °C ou à 15 °C) ou °Proof Masse volumique Concentration en sucre/moût en °Brix ou °Plato Dix unités de mesure personnalisées programmables
Mémoire interne	–	1.200 résultats de mesure, 250 ID d'échantillon, 30 méthodes de mesure
Alimentation électrique	Trois piles alcalines 1,5 V LR06 AA	Trois piles alcalines 1,5 V LR06 AA

* selon la norme ISO 5725