


El Tipi Alkol Ölçüm Cihazı

Snap 41 | Snap 51



 Online satın alma
shop.anton-paar.com

DAHA FAZLA BİLGİ

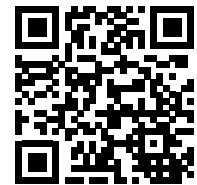

[www.anton-paar.com/
BuySnap](http://www.anton-paar.com/BuySnap)

Snap 41 ve Snap 51, yüksek alkollü içkilerin 30 saniye içinde yerinde ölçümü için piyasada bulunan en hassas dijital alkol ölçüm cihazlarıdır. Bu cihazlar, üretim sürecinin her aşamasında, tüm sertlikteki şekerli distile alkollü içkilerinizdeki alkol içeriğini ölçer.



Nihai sonucu alın:
manuel düzeltme yok



Açıkça tanımlanmış çalışma
rutinleri: hata şansı yok



Yüksek alkollü içkilerinizin alkol
derecesini %0,1 v/v'ye kadar
hassas bir şekilde ayarlayın



İş yerindeki tüm cam
hidrometrelerin yerini tek bir
portatif yoğunluk ölçer alır



Sıçramaya dayanıklı muhafaza
ile sağlam tasarım (IP 54)



Anton Paar'ın alkol ölçüm
cihazları, distilasyon tesisleri ve
devlet kuruluşlarında kullanılan
endüstri standardıdır

**3 yıllık garantimizi tüm müşteriler kullanabilir.
Yeni cihazların tümüne, 3 yıl boyunca tamir giderleri dahil olacak.**

Snap 41

Snap 51

Alınmış patentler	Patent AT516421 (B1), EP3015847 (B1)	–
Ölçüm aralığı	Alkol: %0 v/v ila %100 v/v Sıcaklık: 5 °C ila 30 °C (41 °F ila 86 °F) (otomatik sıcaklık düzeltmesi)	Alkol: %0 v/v ila %100 v/v Sıcaklık: 0 °C ila 40 °C (32 °F ila 104 °F) (otomatik sıcaklık düzeltmesi)
Doğruluk	Alkol: 0,2 %v/v Sıcaklık: 0,2 °C (0,4 °F)	Alkol: 0,1 %v/v Sıcaklık: 0,1 °C (0,2 °F)
Tekrarlanabilirlik s.d.*	Alkol: 0,1 %v/v Sıcaklık: 0,1 °C (0,2 °F)	Alkol: 0,05 %v/v Sıcaklık: 0,05 °C (0,1 °F)
Tekrar üretilebilirlik s.d.*	Alkol: %0,15 v/v	Alkol: %0,07 v/v
Çözünürlük	Alkol: %0,01 v/v Sıcaklık: 0,1 °C (0,1 °F)	Alkol: %0,01 v/v Sıcaklık: 0,01 °C (0,01 °F)
Ortam sıcaklığı	0 °C ila 35 °C (32 °F ila 95 °F)	-10 °C ila +50 °C (14 °F ila 122 °F)
Ölçüm prensibi	Salınlımlı U-tüp teknolojisi	Salınlımlı U-tüp teknolojisi
Desteklenen ölçüm birimleri	20 °C'de veya 15 °C'de % v/v cinsinden alkol konsantrasyonu, °Proof	% v/v cinsinden alkol konsantrasyonu (20 °C'de veya 15 °C'de) veya °Proof Yoğunluk °Brix veya °Plato cinsinden şeker/ekstrakt konsantrasyonu 10 programlanabilir özel ölçüm birimi
Dahili ölçüm sonucu kaydı	–	1.200 ölçüm sonucu, 250 örnek kimliği, 30 ölçüm yöntemi
Güç kaynağı	Üç adet 1,5 V LR06 AA alkalin pil	Üç adet 1,5 V LR06 AA alkalin pil

* ISO 5725'e göre