


手持式 酒精测量仪

Snap 41 | Snap 51



了解更多信息

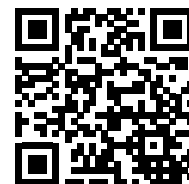

 在线购买
shop.anton-paar.com

[www.anton-paar.com/
BuySnap](http://www.anton-paar.com/BuySnap)

Snap 41 和 Snap 51 是更为精确便捷的数字酒精计,可在 30 秒内完成现场烈酒测量。
它们可以在整个生产过程中测量任何浓度下的无糖蒸馏酒的酒精含量。



得到最终测量结果:
无需手动校正



工作程序清晰明确:不会出错



精确调整烈酒的酒精浓度,精度
高达 0.1% v/v



仅需一台设备,就可取代工作场
所中的所有玻璃比重计



坚固的设计,配备防溅外壳 (IP
54)



安东帕酒精计是酿酒厂和政府
组织使用的行业标准

所有客户均可获得我们的三年保修。
所有新仪器都将带有三年保修。

	Snap 41	Snap 51
已获得的专利	奥地利专利 AT516421 (B1)、 欧洲专利 EP3015847 (B1)	—
测量范围	酒精度: 0% v/v 至 100% v/v 温度: 5 °C 至 30 °C (41 °F至 86 °F) 自动温度校正	酒精度: 0% v/v 至 100% v/v 温度: 0 °C 至 40 °C (32 °F至 104 °F) 自动温度校正
准确度	酒精度: 0.2% v/v 温度: 0.2 °C (0.4 °F)	酒精度: 0.1% v/v 温度: 0.1 °C (0.2 °F)
重复性标准偏差*	酒精度: 0.1% v/v 温度: 0.1 °C (0.2 °F)	酒精度: 0.05% v/v 温度: 0.05 °C (0.1 °F)
再现性标准偏差*	酒精度: 0.15% v/v	酒精度: 0.07% v/v
精度	酒精度: 0.01% v/v 温度: 0.1 °C (0.1 °F)	酒精度: 0.01% v/v 温度: 0.01 °C (0.01 °F)
环境温度	0 °C 至 35 °C (32 °F至 95 °F)	-10 °C 至 +50 °C (14 °F至 122 °F)
测量原理	U型管振荡技术	U型管振荡技术
支持的测量单位	酒精浓度以体积百分比 (%v/v) (校正至 20 °C 或 15 °C) 或标准酒精度 (Proof) 表示	酒精浓度 (%v/v) (20 °C 或 15 °C) 或 °Proof 密 度 糖/浸出物浓度 (°Brix 或 °Plato) 等十个可编 程定制特定测量单位
内存	—	1200 个测量结果, 250 个样品 ID, 30 种测量方法
电源	三节 1.5 V LR06 AA 碱性电池	三节 1.5 V LR06 AA 碱性电池

*符合 ISO 5725 标准