


手持式 酒精度計

Snap 41 | Snap 51



瞭解更多資訊

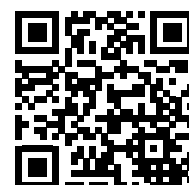

 線上購買
shop.anton-paar.com

[www.anton-paar.com/
BuySnap](http://www.anton-paar.com/BuySnap)

Snap 41 和 Snap 51 是市場上最精確的數位式酒精度計,可在 30 秒內對烈酒進行現場測量。能在整個生產過程中測量任何濃度的無糖蒸餾酒的酒精含量。



直接得到最終測量結果:
無需手動校正



清晰明確的工作流程:避免
錯誤發生。



精確調整您的酒精飲品濃
度,精度高達 0.1% v/v。



一台設備取代工作場所中所
有的玻璃比重計。



堅固的設計和防潑水外殼
(IP 54)



安東帕酒精度計是釀酒廠和政
府組織使用的產業標準

我們提供所有客戶三年保固服務。
所有新儀器均包含三年維修服務。

	Snap 41	Snap 51
已獲得的專利	專利 AT516421 (B1)、EP3015847 (B1)	—
測量範圍	酒精度: 0% v/v 至 100% v/v 溫度: 5 °C 至 30 °C (41 °F 至 86 °F) (自動溫度校正)	酒精度: 0% v/v 至 100% v/v 溫度: 0 °C 到 40 °C (32 °F 到 104 °F) (自動溫度校正)
準確度	酒精度: 0.2% v/v 溫度: 0.2 °C (0.4 °F)	酒精度: 0.1% v/v 溫度: 0.1 °C (0.2 °F)
可重複性標準差*	酒精度: 0.1% v/v 溫度: 0.1 °C (0.2 °F)	酒精度: 0.05% v/v 溫度: 0.05 °C (0.1 °F)
再現性標準差*	酒精度: 0.15% v/v	酒精度: 0.07% v/v
解析度	酒精度: 0.01% v/v 溫度: 0.1 °C (0.1 °F)	酒精度: 0.01% v/v 溫度: 0.01 °C (0.01 °F)
環境溫度	0 °C 至 35 °C (32 °F 至 95 °F)	-10 °C 至 +50 °C (14 °F 至 122 °F)
測量原理	U 型振盪管技術	U 型振盪管技術
支援的測量單位	酒精濃度以體積百分比 (%v/v) (在 20 °C 或 15 °C) 或標準酒精度 (°Proof) 表示	酒精濃度以體積百分比 (%v/v) (在 20 °C 或 15 °C) 或標準酒精度 (°Proof) 表示、密度、糖/萃取物濃度以 °Brix 或 °Plato 表示、提供十種可編程的自訂測量單位
內部儲存空間	—	1,200 個測量結果、 30 種測量方法、250 個樣品 ID
電源	三顆 1.5 V LR06 AA 鹼性電池	三顆 1.5 V LR06 AA 鹼性電池

* 依照 ISO 5725 標準