


# Alcolometro portatile

Snap 41 | Snap 51



SCOPRI DI PIÙ

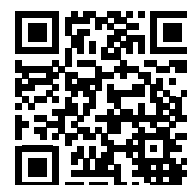

[www.anton-paar.com/  
BuySnap](http://www.anton-paar.com/BuySnap)

 **Acquista online**  
[shop.anton-paar.com](http://shop.anton-paar.com)

Snap 41 e Snap 51 sono gli alcolometri digitali più precisi sul mercato per la misurazione in loco delle bevande alcoliche in soli 30 secondi. Misura della concentrazione di alcol di tutti i distillati privi di zucchero di qualsiasi gradazione durante l'intero processo produttivo.



Risultati finali  
senza correzioni manuali



Routine di lavoro chiaramente  
definite: nessuna possibilità di  
errore



Regolazione accurata della  
gradazione alcolica delle  
bevande alcoliche con una  
precisione fino a 0,1% v/v



Un dispositivo sostituisce tutti  
gli idrometri in vetro



Design robusto con  
alloggiamento a prova di spruzzi  
(IP 54)



Gli alcolometri di Anton Paar  
sono uno standard industriale  
utilizzato nelle distillerie e nelle  
organizzazioni governative

La nostra garanzia di 3 anni disponibile per tutti i clienti.  
Tutti i nuovi strumenti includeranno riparazioni per 3 anni.

|                              | Snap 41                                                                                                                                   | Snap 51                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brevetti                     | Brevetti AT516421 (B1), EP3015847 (B1).                                                                                                   | –                                                                                                                                                                                                     |
| Range di misura              | Concentrazione alcolica: da 0% v/v a 100% v/v<br>Temperatura: da 5°C a 30°C (41 °F to 86 °F)<br>(correzione automatica della temperatura) | Concentrazione alcolica: da 0% v/v a 100% v/v<br>Temperatura: da 0°C a 40°C (32 °F to 104 °F)<br>(correzione automatica della temperatura)                                                            |
| Accuratezza                  | Concentrazione alcolica: 0,2% v/v<br>Temperatura: 0.2 °C (0.4 °F)                                                                         | Concentrazione alcolica: 0,1% v/v<br>Temperatura: 0,1°C (0.2 °F)                                                                                                                                      |
| Ripetibilità (dev. std.)*    | Concentrazione alcolica: 0,1% v/v<br>Temperatura: 0,1°C (0.2 °F)                                                                          | Concentrazione alcolica: 0,05% v/v<br>Temperatura: 0,05°C (0.1 °F)                                                                                                                                    |
| Riproducibilità (dev. std.)* | Concentrazione alcolica: 0,15% v/v                                                                                                        | Concentrazione alcolica: 0,07% v/v                                                                                                                                                                    |
| Risoluzione                  | Concentrazione alcolica: 0,01% v/v<br>Temperatura: 0,1°C (0.1 °F)                                                                         | Concentrazione alcolica: 0,01% v/v<br>Temperatura: 0,01°C (0.01 °F)                                                                                                                                   |
| Temperatura ambiente         | da 0°C a 35°C                                                                                                                             | da -10° C a +50° C (da 14° F a 122° F)                                                                                                                                                                |
| Principio della misurazione  | Tecnologia con tubo ad U oscillante                                                                                                       | Tecnologia con tubo ad U oscillante                                                                                                                                                                   |
| Unità di misura supportate   | Concentrazione alcolica in % v/v a 20°C o a 15°C,<br>°Proof                                                                               | Concentrazione alcolica in % v/v (a 20°C o a 15°C)<br>o °Proof   Densità   Concentrazione zuccherina/<br>estratto in °Brix o °Plato   10 unità di misura<br>programmabili specifiche e personalizzate |
| Memoria interna              | –                                                                                                                                         | 1.200 risultati misurati, 250 ID campione,<br>30 metodi di misurazione                                                                                                                                |
| Alimentazione                | Tre batterie alcaline da 1,5 V LR06 AA                                                                                                    | Tre batterie alcaline da 1,5 V LR06 AA                                                                                                                                                                |

\* secondo ISO 5725