


運動 黏度計系列

SVM 1001



瞭解更多資訊

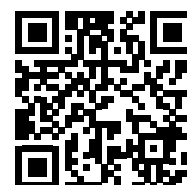

[www.anton-paar.com/
BuySVM](http://www.anton-paar.com/BuySVM)

線上購買
shop.anton-paar.com

SVM 1001 和 SVM 1001 Simple Fill 是您的經濟實惠入門選擇,帶您進入數位自動黏度測量的世界。堅固的測量單元讓您能夠測量從柴油到潤滑油的樣品,無需使用碼錶、恆溫水槽或額外的玻璃毛細管。



開箱即用



相比手動玻璃毛細管黏度計,處理量能提升150%。



操作時間從 30 分鐘縮短至 5 分鐘以內



原地填充、清潔和乾燥設計使儀器使用更加方便。



零誤差:無數字錯誤或手動抄寫報告的問題。



數位化資料處理與存儲提供高可追溯性,避免資料遺失。

我們提供給所有客戶三年保固服務。
所有新儀器均享有三年維修服務。

SVM 1001

SVM 1001 Simple Fill

標準測試方法

符合 ASTM 標準的結果可以顯示為 ASTM D7042 和 D445 (使用整合的 ASTM 定義的偏差校正)

淨重

5.6 kg (12.3 lbs)

6.6 kg (14.6 lbs)

最大樣品處理量

每小時高達 37 份樣品

每小時高達 21 份樣品

黏度範圍

0.3 mm²/s 至 5,000 mm²/s

溫度範圍

15 °C 至 100 °C*

樣品量 (最少)

1.5 ml

3.5 ml

溶劑體積 (最小)

1.5 ml

5.0 ml

黏度重複性

0.1%**

黏度再現性

0.35%**

資料記憶體

1,000 個結果

*內建一個溫度設定第二個溫度設定為選配。

**在工作調整點或校準修正點驗證, 不包含標準的不確定性。有效符合作業調整範圍內的理想測量和樣品條件。