

# AP Connect Editionen

LADEN SIE DIE VOLLSTÄNDIGE  
60-TAGE-DEMOVERSION HERUNTER



[www.anton-paar.com/  
apc-demo](http://www.anton-paar.com/apc-demo)

|   | Start (kostenlos)   | Standard  | Pharma  |
|---|---|---|---|
|   | ↓   | ↓   | ↓   |
|   | Für alle Kundinnen und Kunden, die sich mit AP Connect vertraut machen wollen und ein einzelnes Gerät anschließen möchten.                        | Breit aufgestellt: für Labore und Anwendungen in zahlreichen Branchen.  | Speziell für Laboratorien in stark regulierten Bereichen. Für Unternehmen mit besonders strikten Prüfanforderungen.   |
| Branchen  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lebensmittel und Getränke</li> <li>- Erdöl</li> <li>- Chemie</li> <li>- Aroma- und Duftstoffe</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lebensmittel und Getränke</li> <li>- Erdöl</li> <li>- Chemie</li> <li>- Aroma- und Duftstoffe</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pharmazie</li> <li>- Kosmetik und Körperpflege</li> <li>- Gesundheitswesen</li> <li>- Nahrungsergänzungsmittel</li> <li>- Alle Industrien, die einer strengen Regulierung unterliegen</li> </ul> |
| Lizenz  | Kostenlos   | Einmalige Lizenzgebühr oder jährliche Abonnementgebühr  | Einmalige Lizenzgebühr oder jährliche Abonnementgebühr  |
| Geräteanbindung                                       | 1 Gerät   | bis zu 30 Geräte  | bis zu 30 Geräte  |
| Datenerfassung  | ✓   | ✓   | ✓   |
| Datenanalyse (Ergebnisbrowser)                        | ✓   | ✓   | ✓   |
| Datenexport   | ✓   | ✓   | ✓   |
| Konfigurierbare automatische Exporte                  | 1 Regel   | bis zu 100 Regeln   | bis zu 100 Regeln   |
| Unterstützte Dateiformate für den Datenexport         | PDF, CSV  | PDF, XLS, CSV   | PDF, XLS, CSV   |
| Desktop-Installation                                  | ✓   | ✓   | ✓   |
| Server-Installation                                   | ✓   | ✓   | ✓   |
| Client-Installation (Mehrbenutzerzugriff)             | 1 Benutzerin / 1 Benutzer   | ✓   | ✓   |
| Active-Directory-unterstützende Benutzerverwaltung    | ✓   | ✓   | ✓   |
| Dateilose Datenübertragung (REST-API) <sup>1</sup>    |   | ✓   | ✓   |
| Anbindung von Geräten anderer Hersteller <sup>2</sup> |   | ✓   | ✓   |
| Gerätesteuerung (automatisierte Messreihen)           |   | ✓   | ✓   |
| Rollen und Berechtigungen                             |   | ✓   | ✓   |
| Prüfung & Freigabeprozess                             |   | ✓   | ✓   |
| Elektronische Signatur                                |   | ✓   | ✓   |
| Audit-Trail   |   | ✓   | ✓   |
| Übereinstimmung mit Titel 21 CFR Part 11              |   | ✓   | ✓   |

Gemäß den in der Tabelle dargestellten Merkmalen ist die Einhaltung des ALCOA++ Datenintegritätsprinzips gewährleistet.  
<sup>1</sup> Über separate Lizenz (es fallen zusätzliche Lizenzkosten an)  
<sup>2</sup> Zusätzliche Messgerätheadapter-Software erforderlich

© 2023 Anton Paar GmbH | Alle Rechte vorbehalten.  
 Änderungen der Spezifikationen ohne Ankündigung möglich.  
 D99IP008DE-D



## Software für Ihr papierloses Labor

AP Connect




# AP Connect.

## Für einen optimalen Datenfluss.

Ihre Daten sind komplex, aber unsere Software ist einfach.

Einfach anschließen und loslegen. Alle Ihre Labordaten sind nur einen Klick entfernt: AP Connect ist eine Laborsoftware, die Ihre Geräte von Anton Paar und anderen Herstellern verbindet, Messinformationen weitergibt und die Einhaltung von Regulatorien sicherstellt. Ihre Datendreh Scheibe im Labor – zum Greifen nah.

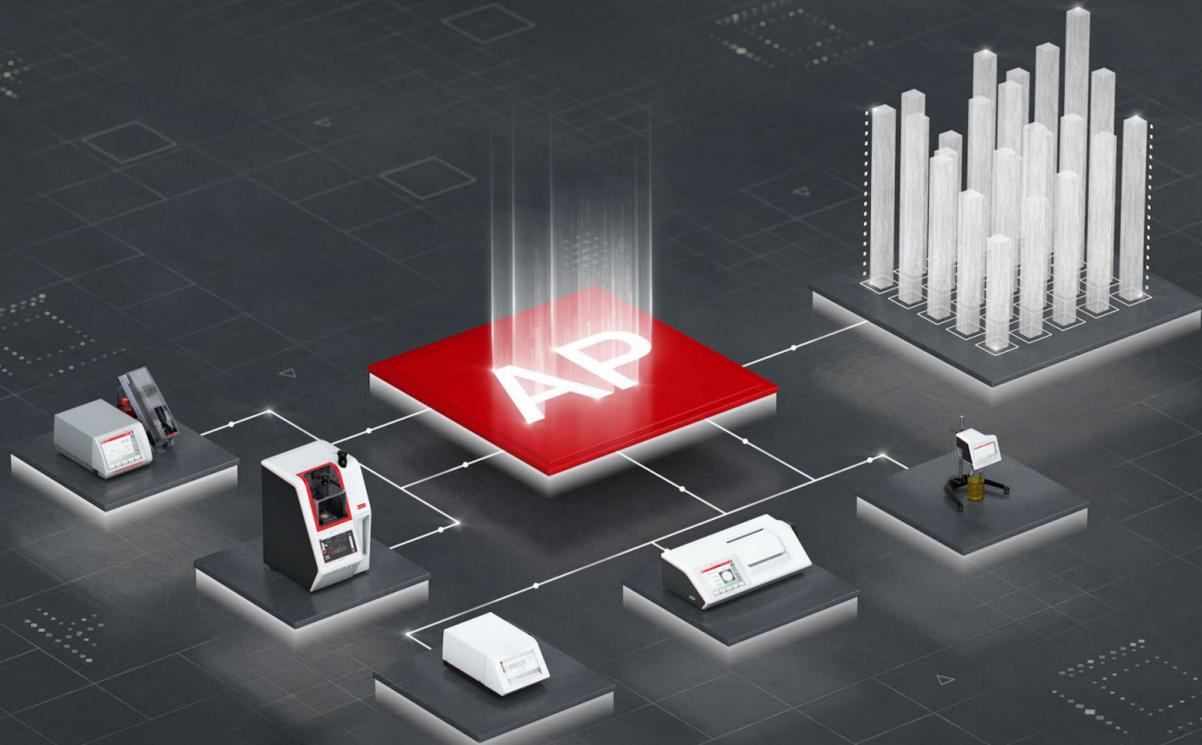

# Paperless.

## Data at Your Fingertips.

Warum ist AP Connect anders als andere Software? Die vielseitige Systemarchitektur ermöglicht eine Integration innerhalb weniger Minuten. Danach einfach anschließen und loslegen! Keine komplexe und zeitaufwendige Implementierung. Kein Schnickschnack. Zeitsparende Funktionalität und erhöhte Produktivität.

Zehntausende Messungen in einem digitalen Raum. 100 % Effizienz. Steigern Sie die Produktivität Ihrer Laborarbeit mit AP Connect.

### Integrieren Sie Ihre Daten – in 3 einfachen Schritten

#### 1. INSTALLIEREN

1 Installieren Sie AP Connect und optional den Messgeräteadapter. Installation in wenigen Minuten.

#### 2. ANMELDEN

2 Melden Sie sich in Sekundenschnelle mit Ihren Windows-Zugangsdaten (Active Directory) bei AP Connect an.

#### 3. REGISTRIEREN

3 Registrieren Sie Ihre Geräte in weniger als 1 Minute.



[www.anton-paar.com/apc](http://www.anton-paar.com/apc)



#### Funktionieren meine Geräte mit AP Connect?

Hier finden Sie mehr als 60 Anton Paar-Geräte, die sich verbinden lassen. Sehen Sie alle unterstützten Messgeräte anderer Hersteller, die über Messgeräteadapter angeschlossen werden können.

#### Connect.

- Plug & Play
- Verbinden Sie Ihre Geräte von Anton Paar und anderen Herstellern

#### Collect.

- Eine zentrale Datenbank für alle Ihre Messdaten
- Zugriff aus dem gesamten Firmennetzwerk
- Mit Informationen arbeiten, statt sie zu suchen

#### Check.

- Rufen Sie Ihre Daten jederzeit ab, um schneller Entscheidungen zu treffen.
- Audit-Trail für lückenlose Rückverfolgbarkeit bei Ihrer Laborarbeit.
- Konfigurierbarer Freigabeprozess mit elektronischer Signatur für alle Ihre Daten

Eliminieren von Übertragungsfehlern garantiert Datenqualität.

Papierloses Arbeiten spart Zeit und setzt Ressourcen frei.

Alle Daten an einem Ort für schnelle und sichere Entscheidungen.

#### Control.

- Benutzerverwaltung mittels Active Directory
- Eindeutige Zuweisung von Rollen & Rechten
- Starten von Messungen (mit mehr als 10 Parametern) direkt von Ihrem PC aus

#### Communicate.

- Eine einzige Schnittstelle zu Ihrem Datenmanagementsystem für alle Ihre Geräte
- Datenfernzugriff für dateilosen Datentransfer über die standardisierte REST-Schnittstelle
- Dateibasierte automatische und manuelle Exporte

#### Comply.

- Die Kombination aller Funktionen von AP Connect gewährleistet volle Einhaltung der Vorschriften in regulierten Umgebungen (z. B. FDA 21 CFR Part 11).

Erhöhter Probendurchsatz dank Batch-Messung.

Konfigurieren Sie Ihre Kommunikationskanäle einmal und Ihre Daten werden ungehindert übertragen.

System-Audit-Trail und Rechteverwaltung garantieren volle Rückverfolgbarkeit.