


Logiciel pour votre Laboratoire sans papier

AP Connect

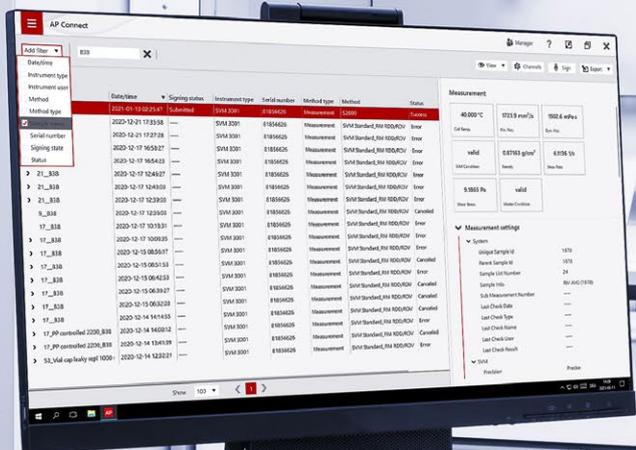


Date/Time	Signing status	Instrument type	Serial number	Method type	Method	Status
2020-12-21 17:39:38		SVM 3001	8185626	Measurement	SVM Standard, VM RODUCH	Error
2020-12-21 17:21:38		SVM 3001	8185626	Measurement	SVM Standard, VM RODUCH	Error
2020-12-17 16:58:07		SVM 3001	8185626	Measurement	SVM Standard, VM RODUCH	Error
2020-12-17 16:54:03		SVM 3001	8185626	Measurement	SVM Standard, VM RODUCH	Error
2020-12-17 12:46:07		SVM 3001	8185626	Measurement	SVM Standard, VM RODUCH	Error
2020-12-17 12:43:03		SVM 3001	8185626	Measurement	SVM Standard, VM RODUCH	Error
2020-12-17 12:23:01		SVM 3001	8185626	Measurement	SVM Standard, VM RODUCH	Error
2020-12-17 12:20:01		SVM 3001	8185626	Measurement	SVM Standard, VM RODUCH	Cancelled
2020-12-17 10:18:31		SVM 3001	8185626	Measurement	SVM Standard, VM RODUCH	Error
2020-12-17 10:08:05		SVM 3001	8185626	Measurement	SVM Standard, VM RODUCH	Error
2020-12-16 08:56:07		SVM 3001	8185626	Measurement	SVM Standard, VM RODUCH	Error
2020-12-15 10:01:33		SVM 3001	8185626	Measurement	SVM Standard, VM RODUCH	Cancelled
2020-12-15 09:42:03		SVM 3001	8185626	Measurement	SVM Standard, VM RODUCH	Cancelled
2020-12-15 09:39:07		SVM 3001	8185626	Measurement	SVM Standard, VM RODUCH	Cancelled
2020-12-15 09:32:08		SVM 3001	8185626	Measurement	SVM Standard, VM RODUCH	Cancelled
2020-12-14 14:14:55		SVM 3001	8185626	Measurement	SVM Standard, VM RODUCH	Cancelled
2020-12-14 14:09:12		SVM 3001	8185626	Measurement	SVM Standard, VM RODUCH	Cancelled
2020-12-14 13:10:09		SVM 3001	8185626	Measurement	SVM Standard, VM RODUCH	Cancelled
2020-12-14 13:03:27		SVM 3001	8185626	Measurement	SVM Standard, VM RODUCH	Cancelled

AP Connect

Laissez les données circuler.

Les données peuvent être complexes, mais ceci est facile.

Connectez et collectez, branchez et utilisez. Toutes vos données de laboratoire à portée d'un clic. AP Connect est un logiciel de laboratoire qui connecte vos instruments d'Anton Paar et d'autres fournisseurs, communique les informations de mesure et garantit la conformité. C'est votre hub de données dans le laboratoire - votre monde au bout de vos doigts.

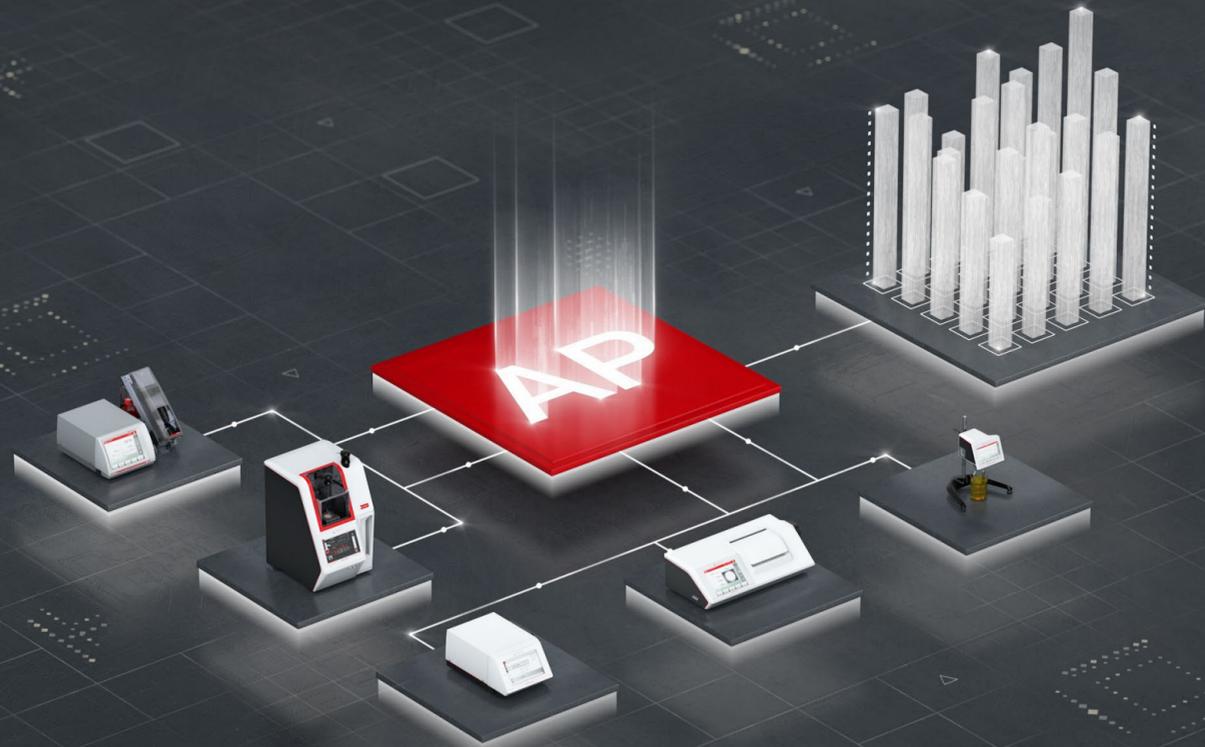

Sans papier.

Les données au bout de vos doigts.

Pourquoi AP Connect est-il différent de tous les autres ? L'architecture polyvalente du système permet une intégration plug and play en quelques minutes. Aucune mise en œuvre complexe et fastidieuse. Aucune clochette ni de sifflets. Une fonctionnalité qui permet de gagner du temps et d'accroître la productivité.

Des dizaines de milliers de mesures, dans un seul espace numérique. 100 % d'efficacité. Voire même amusant. Catalysez votre travail de laboratoire.

Récompensez vos données - en trois étapes simples

INSTALLATION

- 1 Installez AP Connect et, en option, les adaptateurs d'instruments, en quatre minutes seulement

CONNEXION

- 2 Connectez-vous à AP Connect en quelques secondes avec vos informations d'accès Windows (Active Directory)

ENREGISTREMENT

- 3 Enregistrez vos instruments en moins d'une minute.



Mes instruments fonctionnent-ils avec AP Connect ?

Voir l'ensemble des 60+ instruments Anton Paar qui se connectent. Voir tous les instruments pris en charge par d'autres fournisseurs et connectés par l'intermédiaire d'adaptateurs d'instruments

www.anton-paar.com/apc

Connectez.

- Prêt à l'emploi
- Connectez les instruments d'Anton Paar et d'autres fournisseurs

Collectez.

- Une base de données centrale pour toutes vos données de mesure
- Accédez depuis n'importe où du réseau de l'entreprise
- Travailler avec l'information au lieu de la chercher

Vérifiez.

- Consultez vos données à tout moment pour prendre des décisions plus rapidement
- Fonction d'audit trail pour une traçabilité complète
- Processus d'approbation configurable de toutes vos données avec signature électronique

L'absence d'erreur de transcription garantit la qualité des données.

L'absence de documentation permet de gagner du temps et de libérer des ressources pour l'analyse des données.

Toutes les données à analyser en un seul endroit permettent de prendre des décisions rapides et sûres.

Contrôlez.

- Gestion des utilisateurs avec Active Directory
- Attribution sécurisée des rôles et des autorisations
- Déclenchez des mesures avec plus de 10 paramètres directement depuis votre PC

Communiquez.

- Une interface unique pour tous vos instruments vers votre système de gestion des données
- Accès aux données à distance : pour le transfert de données sans fichier via l'interface REST normalisée
- Exportations automatiques et manuelles basées sur des fichiers

Comply.

- La combinaison de toutes les fonctionnalités d'AP Connect garantit une conformité totale dans les environnements réglementés (par exemple, FDA 21 CFR Part 11).

Des mesures en série augmentent le débit d'échantillons

Configurez une fois vos chemins de communication et vos données vont circuler librement.

L'audit trail du système et la gestion des autorisations garantissent une traçabilité totale.

AP Connect Editions

TÉLÉCHARGEZ LA
DÉMO COMPLÈTE DE 60 JOURS



[www.anton-paar.com/
apc-demo](http://www.anton-paar.com/apc-demo)

	Démarrage (gratuit)	Standard	Pharmacie
	↓	↓	↓
	<p>Pour tous les clients qui souhaitent se familiariser et évoluer avec AP Connect et qui souhaitent connecter un seul instrument.</p>	<p>Large base. Pour les laboratoires, et les applications, à travers les industries.</p>	<p>Axé sur les laboratoires dans des environnements intensément réglementés. Pour les opérateurs ayant des exigences spécifiques strictes en matière de tests.</p>
Particulièrement pour ces industries	<ul style="list-style-type: none"> - Industrie agroalimentaire et boissons - Pétrole - Produits chimiques - Arômes & parfums 	<ul style="list-style-type: none"> - Industrie agroalimentaire et boissons - Pétrole - Produits chimiques - Arômes & parfums 	<ul style="list-style-type: none"> - Produits pharmaceutiques - Soins personnels - Soins de santé - Nutraceutique - Conformité réglementaire
Licence	Gratuite	Frais de licence uniques ou frais d'abonnement annuels	Frais de licence uniques ou frais d'abonnement annuels
Connectivité des instruments	1 instrument	Jusqu'à 30 instruments	Jusqu'à 30 instruments
Collecte des données	✓	✓	✓
Analyse des données (navigateur de résultats)	✓	✓	✓
Export de données	✓	✓	✓
Exportations automatiques configurables	1 règle	Jusqu'à 100 règles	Jusqu'à 100 règles
Formats de fichiers pris en charge pour l'exportation de données	PDF, CSV	PDF, XLS, CSV	PDF, XLS, CSV
Installation Desktop	✓	✓	✓
Installation sur serveur	✓	✓	✓
Installation du client (accès multi-utilisateurs)	1 client	✓	✓
Gestion des utilisateurs avec prise en charge de Active Directory	✓	✓	✓
Transfert de données sans fichier (API REST) ¹		✓	✓
Connexion à des instruments d'autres fournisseurs ²		✓	✓
Contrôle des instruments (séries de mesures automatisées)		✓	✓
Rôles et autorisations			✓
Processus de mise en revue et d'approbation			✓
Signature électronique			✓
Audit Trail			✓
Conforme avec le Titre 21 CFR Partie 11			✓

Selon les caractéristiques présentées dans le tableau, le respect du principe d'intégrité des données ALCOA++ est assuré.

¹ Via une licence séparée (des coûts de licence supplémentaires s'appliquent).

² Adaptateurs supplémentaires nécessaires.

© 2023 Anton Paar GmbH | Tous droits réservés.
Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable.
D96IP008FR-D