

L'efficacité et la conformité dans l'analyse Raman

**Cora 5001 avec
Spectroscopy
Suite**



Scan. Match. Result.

IDENTIFICATION ET VÉRIFICATION RAPIDES DES SUBSTANCES
AVEC LE Cora 5001 ET SPECTROSCOPY SUITE D'ANTON PAAR

Cora 5001, en combinaison avec le logiciel Spectroscopy Suite d'Anton Paar, est la solution adaptée au contrôle des marchandises entrantes et à la R&D dans l'environnement réglementé.

Vous avez besoin de résultats, pas de spectres : le système élimine tous les aspects compliqués de la spectroscopie des routines de mesure quotidiennes. Les flux de travail et les paramètres prédéfinis, ainsi que l'autofocus et l'exposition automatique, accélèrent les mesures et évitent les erreurs avant même qu'elles ne se produisent.

Tous les flux de travail, tels que l'analyse d'échantillons, la mise au point de méthodes et la création de bibliothèques de référence, sont spécifiquement conçus pour respecter des règles de conformité strictes.

VOS DÉFIS

- ✓ Je travaille dans un environnement réglementé et je ne peux jamais faire de compromis sur l'intégrité des données à vie.
- ✓ Je dois toujours être en mesure de démontrer que le système est conforme à la norme 21 CFR Part 11 et à l'annexe 11 des BPF de l'UE
- ✓ J'ai besoin d'un système qui évite les erreurs dès le départ au lieu de m'obliger à les poursuivre par la suite sur la base des entrées de la piste d'audit.
- ✓ Je dois vérifier 100 % des marchandises fournies, afin qu'aucune matière première incorrecte ou contaminée ne soit utilisée dans la production, ce qui pourrait gâcher l'ensemble du lot.
- ✓ Je suis chargé d'améliorer l'efficacité du laboratoire de contrôle de qualité et je cherche un test rapide pour vérifier la composition chimique.

Cora 5001 AVEC SPECTROSCOPIE SUITE D'ANTON PAAR - LA SOLUTION À VOS BESOINS

EN SAVOIR PLUS



[www.anton-paar.com/
apb-spectroscopy-suite](http://www.anton-paar.com/apb-spectroscopy-suite)



La solution pour optimiser le CQ

SIMPLE - RAPIDE - À L'ÉPREUVE DES AUDITS



INTÉGRITÉ DES DONNÉES À VIE



PISTE D'AUDIT 100 % TRAÇABLE AVEC FONCTION DE RECHERCHE



SIGNATURE ÉLECTRONIQUE TRANSPARENTE ET SÉCURISÉE



① Vérification des échantillons Raman en quelques secondes

② Outils experts pour le développement de méthodes

③ Génération de bibliothèque de références versionnée

→
LA MEILLEURE ADÉQUATION ENTRE LE MATÉRIEL ET LE LOGICIEL : ÉLIMINEZ LA COMPLEXITÉ POUR ÊTRE PERFORMANT DANS L'ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTÉ

①

VÉRIFICATION DE L'ÉCHANTILLON - LA ROUTINE QUOTIDIENNE

La gestion quotidienne des échantillons est sûre et efficace : Elle ne peut que suivre des méthodes claires et prédéfinies. Aucun réglage de mesure ne peut être effectué. L'exposition automatique et la mise au point automatique garantissent des conditions optimales et éliminent l'influence humaine sur les résultats. Le système compare automatiquement les spectres mesurés avec la bibliothèque de spectres de référence prescrite dans la méthode et donne une réponse de type réussite/échec. Un test d'adéquation du système valide est une condition préalable au lancement d'une mesure.

Veillez à ce qu'aucun ensemble de données ne soit jamais supprimé, car elles sont stockées en toute sécurité dans la base de données SQL. Le processus de signature électronique garantit la soumission, l'examen et l'approbation appropriés des données.

②

DÉVELOPPEMENT DE MÉTHODE

La méthode définit tous les paramètres de mesure spécifiques à l'échantillon. Les méthodes peuvent uniquement être créées ou modifiées par des groupes d'utilisateurs disposant des privilèges correspondants. Le système aide l'utilisateur à trouver les réglages optimaux.

Les méthodes sont automatiquement versionnées. Elles sont soumises à un processus d'examen et d'approbation avec signatures électroniques, ce qui garantit automatiquement que seules les méthodes approuvées peuvent être utilisées pour l'analyse.


③

GÉNÉRATION DE BIBLIOTHÈQUES DE RÉFÉRENCES

Tout comme les méthodes, les ensembles de données de référence peuvent uniquement être générés par les utilisateurs qui y sont autorisés. Le processus est guidé et simple. L'affichage de plusieurs spectres aide à sélectionner les bons ensembles de données de référence.

De plus, les bibliothèques de référence sont automatiquement versionnées. Là encore, le processus d'examen et d'approbation garantit que seules les entrées de bibliothèque approuvées peuvent entrer dans une bibliothèque et que seules les bibliothèques approuvées peuvent être utilisées pour l'analyse.



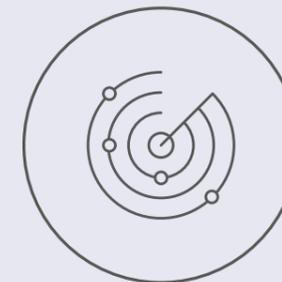

Évitez les erreurs

RESPONSABILITÉ DU SYSTÈME, PAS CELLE DE L'UTILISATEUR

CONTRÔLE D'ACCÈS ✓

- Choisissez entre la gestion des utilisateurs via l'annuaire actif ou les informations d'identification des utilisateurs gérées localement
- La gestion des utilisateurs locaux est assurée :
 - Paramètres complets de complexité des mots de passe
 - Date de dépassement du mot de passe
 - Déconnexion automatique après un temps d'inactivité personnalisable

GRUPE UTILISATEUR ADMINISTRATEURS ✓

- Les groupes d'utilisateurs peuvent être définis selon les normes spécifiques de l'entreprise
- Les privilèges peuvent être définis spécifiquement pour un groupe d'utilisateurs

GESTION DES DONNÉES ✓

- Fonctionnalité de recherche et de filtrage en texte intégral via l'explorateur de données
- Suppression des données impossible
- Conservation des données à vie

TRAÇABILITÉ ET RETRAITEMENT DES DONNÉES ✓

- Les méthodes et bibliothèques versionnées offrent une traçabilité complète : Pour chaque résultat de mesure, la version de la méthode et de la bibliothèque peut être clairement retracée
- Le retraitement des données de mesure originales crée une nouvelle entrée dans la base de données des résultats (aucun résultat de mesure existant ne peut être supprimé ou modifié)

PROCESSUS DE SIGNATURE ÉLECTRONIQUE ✓

- Choisissez un processus de signature en 2 ou 3 étapes, en fonction des politiques de votre entreprise
- Signature des résultats de mesure, des méthodes nouvellement créées, des entrées de bibliothèque et des bibliothèques nouvellement créées, ainsi que des contrôles et des ajustements

AUDIT TRAIL (VÉRIFICATION RÉTROSPECTIVE) ✓

- Signature et commentaire sur les entrées de la piste d'audit
- Fonctionnalité de recherche et de filtrage en texte intégral via l'explorateur de données

EXPORTATION, SAUVEGARDE ET RESTAURATION ✓

- Fonction de sauvegarde et de récupération
- Sauvegarde complète de SQL possible
- Exportation des résultats, y compris les spectres (.pdf/.png/.spc/.csv)

BIBLIOTHÈQUES ✓

- Bibliothèque d'usine adaptée aux caractéristiques de l'instrument
- S.T. Bibliothèque Japan disponible avec jusqu'à 16 000 spectres
- Bibliothèques générées par l'utilisateur et spécifiques aux échantillons de l'utilisateur

PACK DE QUALIFICATION PHARMACEUTIQUE* ✓

Le Pharma Qualification Package (PQP) permet de qualifier votre instrument trois fois plus rapidement. Profitez d'un ensemble complet d'IQ/OQ/PQ, d'une analyse des risques et d'une liste de contrôle 21 CFR Part 11.

* Pour Cora 5001 785 nm

Série Cora 5001

FAITES VOTRE CHOIX

COMPACT ET FACILE À TRANSPORTER

Cora 5001 est prêt à être utilisé sur le terrain, dans votre laboratoire et dans l'entrepôt. Si vous devez analyser des substances sur place, choisissez l'option batterie et effectuez des mesures sur place.

DÉCOUVREZ LES AVANTAGES DE LA TECHNOLOGIE RAMAN AVEC Cora 5001

- ✓ Résultats en quelques secondes - 300 fois plus rapide que les méthodes alternatives
- ✓ Non invasif et non destructif
- ✓ Gagnez du temps : aucune préparation d'échantillon n'est nécessaire
- ✓ Aucune influence de l'eau sur les résultats
- ✓ Surveillance des réactions en temps réel et sur place
- ✓ Une mesure sûre grâce à l'emballage

Cora 5001 Direct

DES CONDITIONS REPRODUCTIBLES POUR VOTRE ÉCHANTILLON

Cora 5001 Direct analyse les échantillons dans un compartiment de mesure fermé. Aucune préparation de l'échantillon nécessaire. Les supports pour comprimés, flacons et autres peuvent être placés avec précision sur la platine d'échantillonnage motorisée.

LASER DE CLASSE 1 POUR UNE SÉCURITÉ UTILISATEUR MAXIMALE

Les instruments Cora 5001 Direct sont certifiés laser de classe 1. Il n'est pas nécessaire de prendre des mesures de sécurité pour le laser - l'instrument est aussi sûr qu'un lecteur de DVD.

AUTOFOCUS - CAPTE LE SIGNAL LE PLUS FORT

La mise au point manuelle sur des échantillons minces ou opaques présentant un faible signal Raman peut être délicate. L'autofocus de Cora trouve l'endroit avec le meilleur signal Raman en quelques secondes.

Cora 5001 Fiber

SONDE FLEXIBLE POUR LES MESURES EN DEHORS DE L'INSTRUMENT

Avec Cora 5001 Fiber, il n'est plus nécessaire d'apporter l'échantillon à l'instrument. Vous pouvez analyser des substances quelle que soit la forme ou la taille de l'échantillon. La sonde fibrée peut même être utilisée in situ.

MESURES SÉCURISÉES À UNE MAIN

Les sondes fibrées Cora 5001 sont la solution sûre pour les mesures à une main. Grâce au déclenchement à distance sur la poignée et aux fonctions de sécurité laser redondantes, l'utilisateur contrôle le processus en toute sécurité, à chaque seconde.

Cora 5001 Direct →



← Cora 5001 Fiber



Accessoires pour un travail efficace

QUELLES QUE SOIENT LES SUBSTANCES QUE VOUS MESUREZ, SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, CES ACCESSOIRES PERMETTENT UNE ANALYSE EN QUELQUES SECONDES

Cora 5001 Direct

UTILISEZ VOS PROPRES FLACONS

Nous avons le support dont vous avez besoin - utilisez vos propres flacons ronds ou rectangulaires ou des cuvettes de différentes tailles.

POUR LES PILULES OU AUTRES PETITS ÉCHANTILLONS SOLIDES

Le porte-pilule permet de positionner de petits échantillons solides comme les pilules et les comprimés.

POUR LES FEUILLES ET LES LAMES DE MICROSCOPE

Les échantillons minces comme les feuilles et les lames peuvent être insérés facilement grâce au support de substrat.

TOUS LES PORTE-ÉCHANTILLONS SONT ÉQUIPÉS D'AIMANTS QUI SE METTENT EN PLACE AVEC PRÉCISION ET PERMETTENT UNE ANALYSE REPRODUCTIBLE SANS REMISE AU POINT.

Cora 5001 Fiber

RÉGLAGE FIXE DE LA MISE AU POINT POUR VOTRE FIBRE

La station d'accueil maintient la sonde fibrée et les flacons en place pour des résultats fiables et reproductibles.

RÉGLAGE PRÉCIS À L'EXTRÉMITÉ DE LA SONDE FIBRE

Si vous devez analyser des substances à une distance définie de la sonde, utilisez l'embout d'espacement réglable. Cela garantit une mise au point constante et une acquisition optimale du signal.

LA SOLUTION ULTIME POUR TRAITER N'IMPORTE QUEL ÉCHANTILLON

La platine xyz positionne la sonde Fiber précisément à l'emplacement où elle est nécessaire. Des vis micrométriques pour l'alignement dans les trois dimensions permettent d'effectuer des mesures sur place, même avec des échantillons de petite taille ou présentant un niveau élevé d'inhomogénéité.

Cora 5001



SPÉCIFICATIONS OPTIQUES

| | |
|-----------------------------------|---|
| Longueur d'onde excitation | 785 nm |
| Gamme spectrale | 100 cm ⁻¹ à 2300 cm ⁻¹ |
| Résolution (selon ASTM E2529) | 6 cm ⁻¹ à 9 cm ⁻¹ |
| Puissance du laser | 0 mW à 450 mW, réglable |
| Spectrographe | Réseau de phases à volume de transmission f/2 (VPG) |
| Durée d'intégration | 0,005 s à 600 s |
| Calibration de la longueur d'onde | Automatique via le logiciel |
| Détecteur à barrettes | CCD de 2048 px |
| Classe laser | 1 pour le modèle Direct 3B pour le modèle Fibre |

SPÉCIFICATIONS PHYSIQUES

| | |
|--|--|
| Dimensions (P x L x H) | 355 mm x 384 mm x 168 mm (14,0 in x 15,1 in x 6,6 in) |
| Poids | 9,8 kg |
| Plage de température de fonctionnement | 10 °C à 35 °C (sans condensation) |
| Dimensions de la sonde à fibres | Longueur du câble : 1,50 m |
| Batterie (en option) | Lithium-ion |
| Durée de vie de la batterie | >1,5 h |
| Puissance d'entrée | Entrée de l'alimentation en ligne : 115/230 V CA, 50/60 Hz Entrée de l'adaptateur d'alimentation pour voiture : 9 V à 32 V DC |
| Consommation électrique | Entrée de l'alimentation en ligne : max. 100 VA |

SPÉCIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES

| | |
|------------------------------|---|
| Écran | Écran tactile 10" |
| Ports de données | 4 x USB 2.0, 1 x Ethernet, 1 x CAN out et 1 x USB vers PC |
| Formats d'export des données | .csv, .txt, .png, .spc, .aps, .pdf |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Connectivité sans fil | Clé WiFi (en option) |
| Bibliothèques spectrales | Options de bibliothèque de l'usine, définie par l'utilisateur, tiers |
| Sécurité | Rôles des utilisateurs avec autorisations personnalisables, connexion par mot de passe des utilisateurs |



“

Nous avons confiance en la haute qualité de nos instruments. C'est pourquoi nous proposons **une garantie totale de trois ans.**

”

Tous les nouveaux instruments* incluront la réparation pendant trois ans.

Vous évitez des coûts imprévus et vous pouvez vous fier à votre instrument en permanence.

En plus de la garantie, nous proposons un large éventail de services supplémentaires et d'options de maintenance.

*En raison de la technologie qu'ils utilisent, certains instruments requièrent un entretien conformément au planning de maintenance. Les trois ans de garantie sont conditionnés par le respect du planning de maintenance.

© 2022 Anton Paar GmbH | Tous droits réservés.
Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable.
E41IP031FR-A

www.anton-paar.com